




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



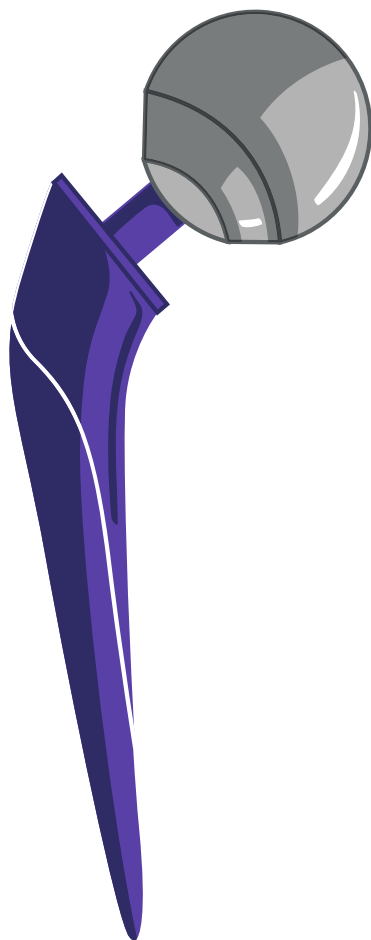

ИМПЛАНТАТЫ

Ножка эндопротеза ТБС цементная «Энсия».....	1
Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эндевиа».....	2
Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эвита».....	3
Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эклипс».....	4
Головка эндопротеза тазобедренного сустава.....	5
Чашка вертлужная бесцементной фиксации «Эндевиа».....	6
Чашка вертлужная цементной фиксации «Энсия».....	7
Чашка вертлужная ревизионная «Револютис» под цементную вставку.....	8
Чашка вертлужная ревизионная «Револютис» стандартная.....	9
Вкладыш (ацетабулярный компонент) под стопорное кольцо или прессфит.....	10
Аугмент полулунный «Револютис».....	11
Рестриктор «Револютис».....	12
Латеральный кейдж для поясничного отдела позвоночника.....	13
Пластина для артродеза плечевого сустава «Камертон».....	14
Тотальные эндопротезы коленного сустава «Артивиио CR» и «Артивиио PS».....	15
Лезвие осциллирующей пилы.....	16
Набор установочного инструмента под ножку «Эндевиа».....	17
Индивидуальный имплантат для эндопротезирования.....	18



Ножка эндопротеза ТБС цементная «Энсия»



ЭНДОАРТ

1.

Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

2.

Точность геометрии

Высокая повторяемость и точность геометрии

3.

Сплав N (Нержавеющая сталь)

Обладает превосходной биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

Специальная заточка

4.

Улучшает фиксацию головки

2 вида исполнения

5.

Выпускается в стандартном и латерализованном исполнении

Матовая поверхность

6.

Матовая поверхность улучшает фиксацию, способствует остеоинтеграции и снижает риск отторжения эндопротеза

Каталожный номер:

51001

Материал:

N (Нержавеющая сталь) 316L

Размерный ряд:

Стандартный



Латерализованный



Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эндевиа»



1. Конус шейки 12/14

Совместим
с широким спектром
бедренных головок
с разными вариантами
расположения центра головки

2. ВТ6 (Титан)

Обладает превосходной
биологической совместимостью
и прочностью без чрезмерной
жесткости

3. Точность геометрии

Высокая повторяемость
и точность геометрии

4. Специальная поверхность

Позволяет ускорить процесс
врастания кости



Каталожный номер:

52002

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Стандартный/латерализованный

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эвита»



1. ВТ6 (Титан)

Обладает высокой биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

2. Уникальная медиальная кривизна (морфометрический клин)

Имплант соответствует широкому диапазону размеров и форм каналов бедренной кости пациентов

3. Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

4. Пористое титановое покрытие

Пористое титановое покрытие с гидроксиапатитовым слоем (НА). Надежная первичная фиксация с ускоренной остеоинтеграцией

5. Оптимизированная длина

Короткая длина ножки в сравнении с традиционными моделями позволяет использовать подходы без ущерба первичной стабильности

Каталожный номер:

53002

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Латерализованное исполнение



Ножка эндопротеза ТБС бесцементная «Эклипс»



1. Адаптация под малоинвазивный доступ

Позволяет вводить инструмент и имплант по дугообразной траектории, не повреждая большой вертел

2. Пористое титановое покрытие

Пористое титановое покрытие с гидроксиапатитовым слоем (НА)
Надежная первичная фиксация с ускоренной остеоинтеграцией

3. Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

4. Конусовидный кончик ножки

Конусовидный кончик ножки плавно переходит в пирамидальную форму.
Снижает пиковые нагрузки на кость на конце импланта и минимизирует боли в бедре

Каталожный номер:

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Латерализованное исполнение

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Головка эндопротеза тазобедренного сустава



1. Посадочный конус 12/14

Совместим с широким спектром бедренных ножек

2. Маркировка

Сплошной контроль изделия на всех этапах жизненного цикла

3. Сплав N (Нержавеющая сталь)

Обладает превосходной биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

4. Чистота обработки

Дополнительная шлифовка и полировка. Отклонение от сферичности - не более 0,002 мм

5. CoCrMo

Обеспечивает высокую износостойкость

Каталожный номер:

57001

Материал:

N (Нержавеющая сталь)/CoCrMo (Кобальт-хром-молебден)

Размерный ряд:

28S

28M

28L

28XL

28XXL

32S

32M

32L

32XL

32XXL

Чашка вертлужная бесцементной фиксации

«Эндевиа»




1. Прессфит или стопорное кольцо

Обеспечивает
легкую и быструю
замену вкладыша

2. Трабекулярная структура

Способствует эффективной
остеоинтеграции

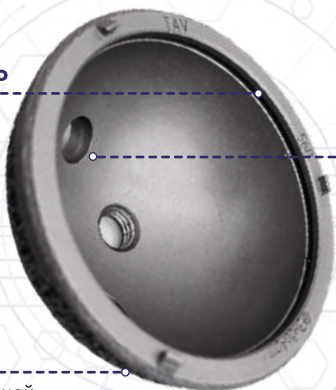

3. 3 отверстия

Для установки винтов
под различными
углами

Каталожный номер:

55001

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

Прессфит

46K 48K 50L 52L 54M 56M 58N 60N 62P 64P

Под стопорное кольцо

46A 48A 50B 52B 54C 56C 58D 60D 62E 64E

Чашка вертлужная цементной фиксации «Энсия»



1. Качественный материал

Применяется оригинальный СВМПЭ РЕ-1020, обладающий высоким сопротивлением к трению

2. Рентген кольцо

Для более точного послеоперационного контроля

3. Полнопрофильная форма

Обеспечивает высокую стабильность эндопротеза

Каталожный номер:

54002

Материал:

СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размерный ряд:

Два варианта исполнения (прямая и с козырьком)



Чашка вертлужная ревизионная «Револютис» под цементную вставку



Увеличенное количество отверстий от 13 до 21 **2.**

Оптимальный вариант фиксации с учетом анатомических особенностей пациента снижает риск ослабления крепления

1. Цементная фиксация

Пористая внутренняя поверхность обеспечивает стабильную фиксацию костного цемента при использовании с чашкой «Энсия»



Трабекулярная **3.** структура

Способствует эффективной остеоинтеграции

Каталожный номер:

58006

Материал:


BT6 (Титан)

Размерный ряд:

54/46 56/48 58/50 60/52 62/54 64/56 66/58 68/60 70/62 72/64 74/66 76/68 78/70 80/72

Чашка вертлужная ревизионная

«Револютис» стандартная

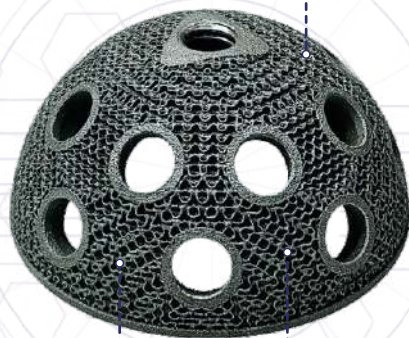

1. Прессфит

Обеспечивает легкую и быструю замену вкладыша «Эндевиа»

2. Увеличенное количество отверстий от 13 до 21

Оптимальный вариант фиксации с учетом анатомических особенностей пациента снижает риск ослабления крепления

3. Трабекулярная структура

Способствует эффективной остеоинтеграции

Каталожный номер:

58005

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

50L 52L 54M 56M 58N 60N 62P 64P 66Q 68Q 70R 72R 74R

Вкладыш (ацетабулярный компонент) под стопорное кольцо или прессфит



1. Минимальная толщина 6 мм

Обеспечивает
долговечность
изделия

2. Прессфит и стопорное кольцо

Помогает сохранить кость
и облегчить установку

3. Качественный материал

Применяется
оригинальный
СВМПЭ РЕ-1020,
обладающий
высоким сопротивлением
к трению

Каталожный номер:

56001

Материал:

СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размерный ряд:

Прессфит (изготавливается прямой и с козырьком)

(28 K) (28 L) (28 M) (28 N) (28 P) (32 L) (32 M) (32 N) (32 P) (32 Q) (32 R)

Стопорное кольцо

(28 A) (28 B) (28 C) (28 D) (28 E) (32 C) (32 D) (32 E)

Аугмент полулунный

«Револютис»



1. Форма аугмента


Позволяет заполнить
дефектные участки
вертлужной впадины

2. Трабекулярная структура

Способствует эффективной
остеоинтеграции

3. Разнонаправленные отверстия

Позволяют подобрать
требуемое положение винтов

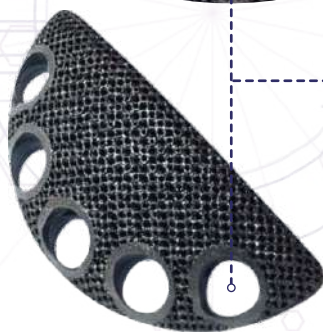

Каталожный номер:

58001

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

10/50	10/54	10/58	10/62	10/66	10/70	15/50	15/54	15/58	15/62	15/66	15/70
20/50	20/54	20/58	20/62	20/66	20/70	30/50	30/54	30/58	30/62	30/66	30/70

Рестриктор

«Револютис»



ЭНДОАРТ

1. Универсальное отверстие М8

Под стандартный
инструмент

Трабекулярная структура 3.

Способствует
эффективной
остеоинтеграции

2. Шипы

Обеспечивают
надежную ротационную
фиксацию



Каталожный номер:

58002

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

48

51

54

57

60

63

Латеральный кейдж для поясничного отдела позвоночника



2. Контактные поверхности с мелкой пористостью

Способствует миграции остеобластов, обеспечивая биологическое сращение имплантата с естественной костной тканью

3. Резьбовое отверстие M4

под установочный инструмент

1. Анатомически оптимизированная форма

Выпуклая поверхность в зоне контакта с позвонками

6. Закругленный передний край

Облегчает установку через латеральный доступ

5. Решетчатое тело имплантата

Крупные сквозные ячейки позволяют проникать биологической жидкости в зону сращения позвонков

4. Цельный кант по краям

Защищает мягкие ткани от повреждений



Каталожный номер:

58007

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

Индивидуальная продукция

Пластина для артродеза плечевого сустава «Камертон»



ЭНДОАРТ

1. Лопаточный фиксирующий узел

В виде вилки с блокирующими винтами для крепления к лопаточной кости

2. ВТ6 (Титан)

Обладает высокой биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

3. 2 варианта выпуска

Выпускается в двух исполнениях: для правой и левой конечности

4. Универсальная геометрия

Позволяет решить широкий спектр задач

5. Накостная пластина

Для фиксации диафиза плечевой кости

6. Отверстия с конической блокирующей резьбой

Для винтов с угловой стабильностью $\varnothing$ 5.0мм

7. Угол наклона отверстий

Два крайних отверстия имеют наклон в 15°

Каталожный номер:

58008

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Индивидуальная продукция

Тотальные эндопротезы коленного сустава

«Артивио CR» и «Артивио PS»



1. 12 исполнений

Феморальный компонент
эндопротеза выпускается
в 12 исполнениях

3. Чистота обработки

Дополнительная
шлифовка позволяет
отклонение от
сферичности
до 0.002 мм

5. Качественный материал

Применяется оригинальный
материал СВМПЭ РЕ-1020,
обладающий высоким
сопротивлением к трению

7. 8 исполнений

Тибиальный компонент
эндопротеза выпускается
в 8 исполнениях

2. CoCrMo

Обеспечивает высокий
ресурс и прочность
изделия

4. 43 исполнения

Тибиальный вкладыш
выпускается в
43 исполнениях

6. Высокая повторяемость

Изготавливается
на станках ЧПУ
высокой точности

8. ВТ6 (Титан)

Обладает высокой биологической
совместимостью и прочностью
без чрезмерной жесткости

Материал:

CoCrMo, СВМПЭ РЕ-1020, ВТ6 (Титан)

Лезвие осциллирующей пилы



1. Посадочное отверстие

Изготовление под любое
силовое оборудование

2. Контрастная линейка

Обеспечивает точность
ориентирования

Заточка 3.

Увеличенный ресурс,
быстрый и ровный разрез кости

Материал:

Сталь 95х18

Размерный ряд:

Изготавливается под заказ

Набор установочного инструмента под ножку

«Эндевиа»



ЭНДОАРТ

1. Система быстрой фиксации

Зажим с защелкивающимся креплением позволяет быстро менять рашпили

2. Ударная площадка

Верхняя часть инструмента имеет прочную платформу для нанесения ударов хирургическим молотком

Удобный доступ

3.

В комплект установочного инструмента входят офсетные ручки рашпиледержателя - правая/левая, а также прямая ручка, что дает возможность врачу сохранять правильную траекторию и облегчает доступ к формированию правильного костномозгового канала

Надежность

4.

Набор установочного инструмента выполнен из высококачественной хирургической нержавеющей стали для достижения максимальной надежности и долговечности

Состав комплекта установочного инструмента

(в зависимости от спецификации заказа комплектность набора инструмента может меняться)

1. Рашпили: 14 шт. (размеры 01; 0-12)
2. Рашпиледержатель прямой
3. Рашпиледержатель левый
4. Рашпиледержатель правый
5. Рукоятка ударная для рашпиледержателя
6. Шейки примерочные (01-00; 1-6; 7-12)
7. Шейки примерочные латерализованные (1-6; 7-12)
8. Рашпиль стартовый
9. Рашпиль изогнутый «крысиный хвост»
10. Долото окончательное
11. Развертка прямая, коническая

Каталожный номер:


42002

Индивидуальный имплантат для эндопротезирования



Резьбовые/безрезьбовые отверстия **1.**

Возможность изготовления отверстий без резьбы, а также с конической блокирующей резьбой

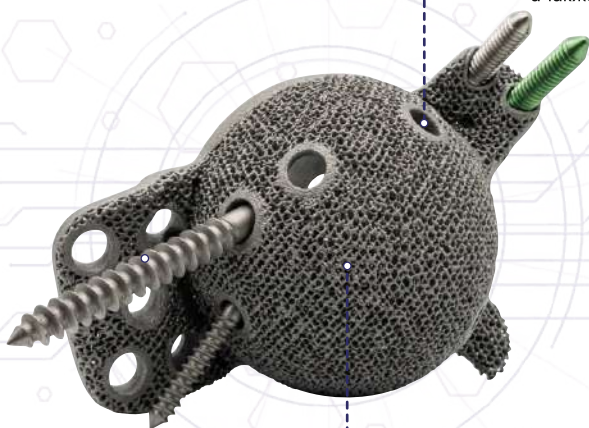

2. Изготовление изделий с различной пористой структурой

Ускоряет остеоинтеграцию, снижает длительность реабилитации, улучшает долгосрочную стабильность имплантата

Проектный офис выполняет индивидуальные заказы.


На основе КТ-снимков пациента создаются цифровые модели и производится примерочная оснастка. Затем изготавливаются финальные изделия с заданными характеристиками и геометрией.



 Для записей

[illegible]

ЖИЗНЬ как ИСКУССТВО

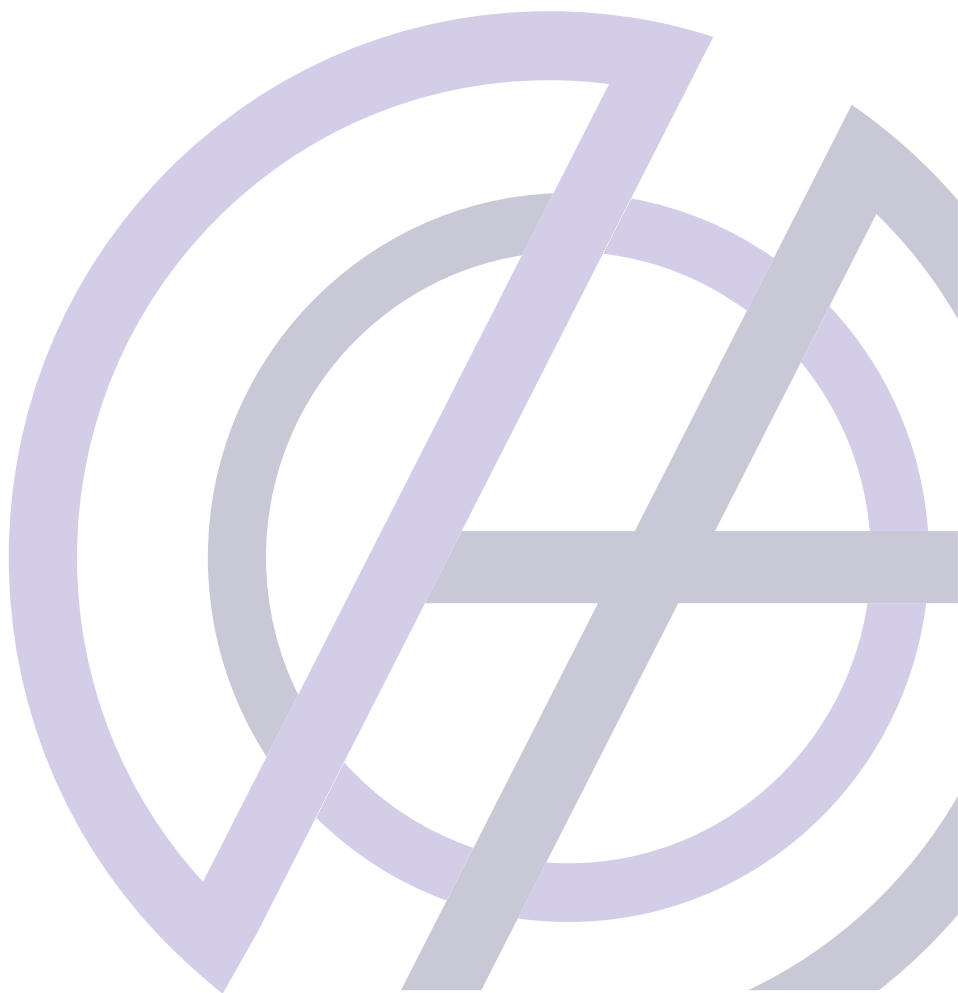



ЭНДОАРТ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭндоАрт»

Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, к. 2
Телефон +7 (812) 779-14-49



197375, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,
д. 28, к. 2

+7 (812) 779-14-49
info@endoprotez.ru
endoprotez.ru

