



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





ИМПЛАНТАТЫ

Ножка эндопротеза цементная Энсия.....	1
Ножка эндопротеза бесцементная Эндевиа.....	2
Ножка эндопротеза бесцементная Эвита.....	3
Ножка эндопротеза бесцементная Эклипс.....	4
Головка эндопротеза тазобедренного сустава.....	5
Чашка бесцементной фиксации Эндевиа.....	6
Чашка ревизионная Револютис под цементную вставку.....	7
Чашка ревизионная Револютис стандартная.....	8
Ацетабулярный компонент (вкладыш) под стопорное кольцо или прессфит.....	9
Вертлужная впадина Энсия.....	10
Аугмент полулунный Револютис.....	11
Рестриктор Револютис.....	12
Латеральный кейдж для поясничного отдела позвоночника.....	13
Камертон.....	14
Тотальные эндопротезы коленного сустава Артивио CR и Артивио PS.....	15
Лезвие осциллирующей пилы.....	15
Набор установочного инструмента под ножку Эндевиа.....	16



Ножка эндопротеза цементная **Энсия**

1.

Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

2.

Точность геометрии

Высокая повторяемость и точность геометрии

3.

Сплав N (Нержавеющая сталь)

Обладает превосходной биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

Специальная заточка

4.

Улучшает фиксацию головки

2 вида исполнения

5.

Выпускается в стандартном и латерализованном исполнении

Матовая поверхность

6.

Матовая поверхность улучшает фиксацию, способствует остеоинтеграции и снижает риск отторжения эндопротеза

Каталожный номер:

51001

Материал:

N (Нержавеющая сталь) 316L

Размерный ряд:

Стандартный



Латерализованный



Ножка эндопротеза бесцементная **Эндевиа**



1. Конус шейки 12/14

Совместим
с широким спектром
бедренных головок
с разными вариантами
расположения центра головки

2. ВТ6 (Титан)

Обладает превосходной
биологической совместимостью
и прочностью без чрезмерной
жесткости

3. Точность геометрии

Высокая повторяемость
и точность геометрии

4. Специальная поверхность

Позволяет ускорить процесс
врастания кости



Каталожный номер:

52002

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Стандартный/латерализованный

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ножка эндопротеза бесцементная **Эвита**



ЭНДОАРТ

1. ВТ6 (Титан)

Обладает высокой биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

2. Уникальная медиальная кривизна (морфометрический клин)

Имплант соответствует широкому диапазону размеров и форм каналов бедренной кости пациентов

3. Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

4. Пористое титановое покрытие

Пористое титановое покрытие с гидроксиапатитовым слоем (НА)
Надежная первичная фиксация с ускоренной остеоинтеграцией

5. Оптимизированная длина

Короткая длина ножки в сравнении с традиционными моделями позволяет использовать подходы без ущерба первичной стабильности

Каталожный номер:

53002

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Латерализованное исполнение



Ножка эндопротеза бесцементная **Эклипс**



ЭНДОАРТ

1. Адаптация под малоинвазивный доступ

Позволяет вводить инструмент и имплант по дугообразной траектории, не повреждая большой вертел

2. Пористое титановое покрытие

Пористое титановое покрытие с гидроксиапатитовым слоем (НА)
Надежная первичная фиксация с ускоренной остеоинтеграцией

3. Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки

4. Конусовидный кончик ножки

Конусовидный кончик ножки плавно переходит в пирамидальную форму. Снижает пиковые нагрузки на кость на конце импланта и минимизирует боли в бедре

Каталожный номер:

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

Латерализованное исполнение

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Головка эндопротеза тазобедренного сустава




1. Конус шейки 12/14

Совместим с широким спектром бедренных головок с разными вариантами расположения центра головки



2. Маркировка

Сплошной контроль изделия на всех этапах жизненного цикла

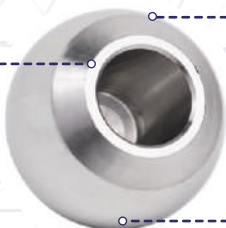

3. Сплав N (Нержавеющая сталь)

Обладает превосходной биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

4. Чистота обработки

Дополнительная шлифовка позволяет отклонение от сферичности до 0.002 мм



5. CoCrMo

Обеспечивает высокий ресурс и прочность изделия

Каталожный номер:

57001

Материал:

N (Нержавеющая сталь)/CoCrMo (Кобальт-хром-молебден)

Размерный ряд:



Чашка бесцементной фиксации **Эндевиа**




1. Прессфит или стопорное кольцо

Обеспечивает легкую и быструю замену вкладыша

2. Трабекулярная структура

Способствует эффективной остеоинтеграции

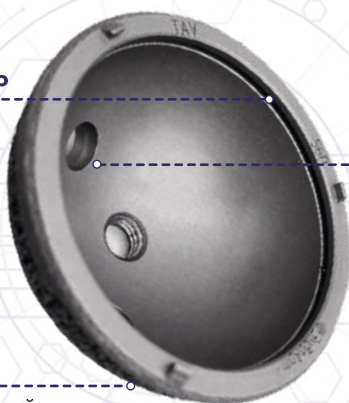

3. 3 отверстия

Для позиционирования винтов под различными углами

Каталожный номер:

55001

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

Прессфит

46K 48K 50L 52L 54M 56M 58N 60N 62P 64P

Под стопорное кольцо

46A 48A 50B 52B 54C 56C 58D 60D 62E 64E

Чашка ревизионная

Револютис

под цементную вставку



ЭНДОАРТ

Увеличенное количество отверстий от 13 до 21 **2.**

Оптимальный вариант фиксации с учетом анатомических особенностей пациента снижает риск ослабления крепления

1. Цементная фиксация

Пористая внутренняя поверхность обеспечивает стабильную фиксацию костного цемента при использовании с чашкой «Энсия»



Трабекулярная структура **3.**

Способствует эффективной остеointеграции

Каталожный номер:

58006

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

54/46 56/48 58/50 60/52 62/54 64/56 66/58 68/60 70/62 72/64 74/66 76/68 78/70 80/72

Чашка ревизионная

Револютис стандартная



ЭНДОАРТ

Увеличенное количество отверстий от 13 до 21 **2.**

Оптимальный вариант фиксации с учетом анатомических особенностей пациента снижает риск ослабления крепления

1. Прессфит

Обеспечивает легкую и быструю замену вкладыша «Эндевиа»



Трабекулярная структура **3.**

Способствует эффективной остеointеграции

Каталожный номер:

58005

Материал:

BT6 (Титан)

Размерный ряд:

50L 52L 54M 56M 58N 60N 62P 64P 66Q 68Q 70R 72R 74R

Ацетабулярный компонент (вкладыш) под стопорное кольцо или прессфит



1. Минимальная толщина 6 мм

Обеспечивает
долговечность
изделия

2. Прессфит и стопорное кольцо

Помогает сохранить кость
и облегчить установку

3. Качественный материал

Применяется
оригинальный
СВМПЭ РЕ-1020,
обладающий
высоким сопротивлением
к трению

Каталожный номер:
56001

Материал:
СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размерный ряд:
Прессфит (изготавливается прямой и с козырьком)

28K 28L 28M 28N 28P 32L 32M 32N 32P 32Q 32R

Стопорное кольцо

28A 28B 28C 28D 28E 32C 32D 32E

Вертлужная впадина

Энсия



1. Качественный материал

Применяется оригинальный СВМПЭ РЕ-1020, обладающий высоким сопротивлением к трению

2. Рентген кольцо

Для более точного послеоперационного контроля

3. Полнопрофильная форма

Обеспечивает высокую стабильность эндопротеза

Каталожный номер:

54002

Материал:

СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размерный ряд:



Аугмент полулунный

Револютис



ЭНДОАРТ

1.


Форма аугмента

Позволяет заполнить
дефектные участки
вертлужной впадины

2.

Трабекулярная структура

Способствует эффективной
остеоинтеграции

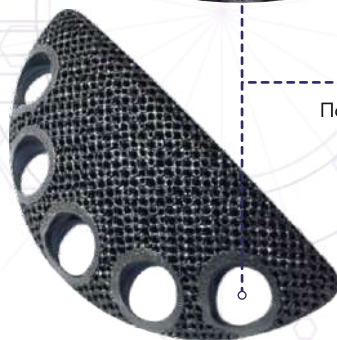

Разнонаправленные отверстия **3.**

Позволяют подобрать требуемое
положение крепежа

Каталожный номер:

58001

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:

10/50	10/54	10/58	10/62	10/66	10/70	15/50	15/54	15/58	15/62	15/66	15/70
20/50	20/54	20/58	20/62	20/66	20/70	30/50	30/54	30/58	30/62	30/66	30/70

Рестриктор

Револютис



ЭНДОАРТ

1. Универсальное отверстие М8

Под стандартный
инструмент

Трабекулярная структура 3.

Способствует
эффективной
остеоинтеграции



2. Шипы

Обеспечивают
надежную ротационную
фиксацию

Каталожный номер:

58002

Материал:

ВТ6 (Титан)

Размерный ряд:



Латеральный кейдж для поясничного отдела позвоночника



Каталожный номер:

58007

Материал:

BT6 (Титан)

**Индивидуальная
продукция**

Пластина для артродеза плечевого сустава **Камертон**



ЭНДОАРТ

1. Лопаточный фиксирующий узел

В виде вилки с блокирующими винтами для крепления к лопаточной кости

2. ВТ6 (Титан)

Обладает высокой биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

3. 2 варианта выпуска

Выпускается в двух исполнениях: для правой и левой конечности

4. Универсальная геометрия

Позволяет решить широкий спектр задач

5. Накостная пластина

Для фиксации диафиза плечевой кости

6. Отверстия с конической блокирующей резьбой

Для винтов с угловой стабильностью $\varnothing 5.0\text{мм}$

7. Угол наклона отверстий

Два крайних отверстия имеют наклон в 15°

Каталожный номер:

58008

Материал:

ВТ6 (Титан)

**Индивидуальная
продукция**

Тотальные эндопротезы коленного сустава

Артивио CR и Артивио PS



ЭНДОАРТ



1.

12 исполнений

Феморальный компонент эндопротеза выпускается в 12 исполнениях

CoCrMo

2.

Обеспечивает высокий ресурс и прочность изделия

3.

Чистота обработки

Дополнительная шлифовка позволяет отклонение от сферичности до 0.002 мм

43 исполнения

4.

Тибиаьный вкладыш выпускается в 43 исполнениях

5.

Качественный материал

Применяется оригинальный материал СВМПЭ РЕ-1020, обладающий высоким сопротивлением к трению

Высокая повторяемость

6.

Изготавливается на станках ЧПУ высокой точности

7.

8 исполнений

Тибиаьный компонент эндопротеза выпускается в 8 исполнениях

ВТ6 (Титан)

8.

Обладает высокой биологической совместимостью и прочностью без чрезмерной жесткости

Материал:

CoCrMo, СВМПЭ РЕ-1020, ВТ6 (Титан)

Лезвие осциллирующей пилы



1. Посадочное отверстие

Возможно изготовление
под любой инструмент

2. Контрастная линейка

Обеспечивает точность
прореза на заданную глубину



Заточка 3.

Выполнена особым способом,
что увеличивает ресурс

Материал:

Сталь 95х18

Размерный ряд:

Изготавливается под заказ

Набор установочного инструмента под ножку

Эндевиа



1. Система быстрой фиксации

Зажим с защелкивающимся креплением, что позволяет хирургу быстро менять рашпили по мере увеличения их размера

2. Ударная площадка

Верхняя часть инструмента имеет прочную платформу для нанесения ударов хирургическим молотком

Удобный доступ

3.

В комплект установочного инструмента входят офсетные ручки рашпиледержателя - правая/левая, а также прямая ручка, что дает возможность врачу сохранять правильную траекторию и облегчает доступ к формированию правильного костномозгового канала

Надежность

4.

Набор установочного инструмента выполнен из высококачественной хирургической нержавеющей стали для достижения максимальной надежности и долговечности

Состав комплекта установочного инструмента

(в зависимости от спецификации заказа комплектность набора инструмента может меняться)

1. Рашпили: 14 штук разных размеров (01, 0-12)
2. Рашпиледержатель прямой
3. Рашпиледержатель левый
4. Рашпиледержатель правый
5. Рукоятка ударная для рашпиледержателя
6. Шейки примерочные 1-6, 7-12
7. Шейки примерочные латерализованные 1-6, 7-12
8. Рашпиль стартовый
9. Рашпиль «крысиный хвост»
10. Долото окончатое
11. Развертка прямая, коническая

Каталожный номер:

42002

ЖИЗНЬ как ИСКУССТВО






ЭНДОАРТ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭндоАрт»

Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, к. 2
Телефон +7 (812) 779-14-49

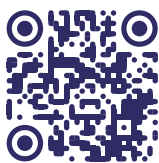

197375, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,
д. 28, к. 2

+7 (812) 779-14-49
info@endoprotez.ru
endoprotez.ru